

高密度脂蛋白胆固醇 (HDL-C) 含量检测试剂盒说明书

可见分光光度法

注意：本产品试剂有所变动，请注意并严格按照该说明书操作。

货号：BC5320

规格：50T/48S

产品组成：使用前请认真核对试剂体积与瓶内体积是否一致，有疑问请及时联系索莱宝工作人员。

试剂名称	规格	保存条件
提取液一	自备试剂	-
提取液二 A	液体 7.5 mL×1 瓶	2-8°C保存
提取液二 B	液体 7.5 mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂一	液体 5 mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂二	液体 70 mL×1 瓶	2-8°C保存
试剂三	液体 0.45 mL×1 支	2-8°C保存
试剂四	液体 0.07 mL×1 瓶	2-8°C保存
标准品	粉剂×1 支	2-8°C保存


溶液的配制：

1. 提取液：自备异丙醇，大约需要 60mL，常温保存；试剂盒内提供一个 30mL 棕色空瓶，仅做分装使用，请自行标注试剂名称。
2. 提取液二：临用前根据样本量将提取液二 A: 提取液二 B=100μL: 100μL (约 1T) 的比例配制提取液二，当天用完。
3. 试剂四：液体置于试剂瓶内 EP 管中。
4. 标准品：10 mg 胆固醇，临用前加入 517 μL 提取液一，振荡溶解，即为 50 μmol/mL 的胆固醇标准溶液。
5. 工作液的配制：根据样本量按试剂一: 试剂二: 试剂三: 试剂四=0.63mL: 8.37mL: 60 μL: 9 μL (共9.069mL, 约10T) 的比例配制工作液，现用现配。

产品说明：

高密度脂蛋白 (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL-C) 是血清脂蛋白中密度最大、颗粒最小的脂蛋白，主要作用为将周围组织的胆固醇运送到肝脏进行降解。众多流行病学研究表明，HDL-C水平与动脉粥样硬化(AS)、冠心病(GHD) 呈负相关，对于临床诊断动脉粥样硬化、冠心病、高血压等疾病有重要参考价值。

使用选择性沉淀剂将HDL-C特异性分离出来，利用酯酶催化胆固醇酯水解生成游离胆固醇 (FC) 和游离脂肪酸 (FFA)，从而把胆固醇酯转化为FC；进一步利用胆固醇氧化酶催化FC氧化，生成4-胆甾烯酮和H₂O₂；最后利用过氧化物酶催化H₂O₂氧化4-氨基安替比林和苯胺类似物，生成紫色化合物，其在546nm有特征吸收峰，其颜色深浅与HDL-C含量成正比。

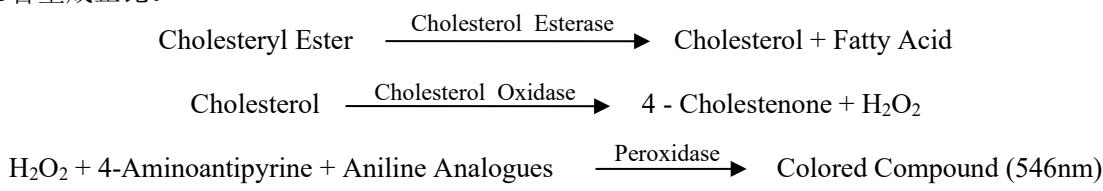

注意：实验之前建议选择 2-3 个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

需自备的仪器和用品：

可见分光光度计、天平、低温离心机、水浴锅/恒温培养箱、1mL玻璃比色皿、研钵/匀浆器/细胞超声破碎仪、可调式移液枪、冰、蒸馏水、异丙醇。

操作步骤：

一、样本处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）

- 组织：按照组织质量 (g)：提取液体积 (mL) 为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液一）进行冰浴匀浆。10000g, 4°C 离心 10min，取上清置冰上待测。
- 细菌/细胞：按照细胞数量 (10^4 个)：提取液体积 (mL) 为 500~1000: 1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液一），冰浴超声波破碎细胞（功率 300W，超声 2 秒，间隔 3 秒，总时间 3min）；然后 10000g, 4°C 离心 10min，取上清置于冰上待测。
- 血清（浆）等液体样本：直接测定。若有沉淀请离心后取上清待测。

二、测定步骤

- 可见分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 546nm，蒸馏水调零。
- 标准溶液的稀释：将 50 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ 胆固醇标准溶液用提取液一进行稀释得到 2、1.25、0.625、0.3125、0.15625、0.078125 $\mu\text{mol}/\text{mL}$ 的标准溶液备用。
- 标准溶液稀释可参考下表：

序号	稀释前浓度 ($\mu\text{mol}/\text{mL}$)	标准溶液体积 (μL)	提取液体积 (μL)	稀释后浓度 ($\mu\text{mol}/\text{mL}$)
1	50	40	960	2
2	2	625	375	1.25
3	1.25	500	500	0.625
4	0.625	500	500	0.3125
5	0.3125	500	500	0.15625
6	0.15625	500	500	0.078125

备注：实验中每个标准管需 200 μL 标准溶液。

- 在 1.5mLEP 管按下表步骤加样：

试剂名称 (μL)	测定管	标准管	空白管
样本	200	-	-
标准溶液	-	200	-
提取液二	200	200	-
充分混匀，常温静置 10min，3000rpm 常温离心 15min，取上清。			
上清	100	100	-
提取液一	-	-	100
工作液	900	900	900
充分混匀，37°C 静置 1h，反应完成后测定 546nm 处吸光值 A，分别记为 A 测定、A 标准和 A 空白， ΔA 测定=A 测定-A 空白， ΔA 标准=A 标准-A 空白。空白管和标准曲线只需测 1-2 次。			

三、高密度脂蛋白胆固醇含量计算

1. 标准曲线的绘制:

根据标准管的浓度 (x, $\mu\text{mol/mL}$) 和吸光度 ΔA 标准 (y, ΔA 标准) , 建立标准曲线。根据标准曲线, 将 ΔA 测定 (y, ΔA 测定) 带入公式计算样本浓度 (x, $\mu\text{mol/mL}$) 。

2. HDL-C含量的计算:

(1) 按血清 (浆) 等液体体积计算:

$$\text{HDL-C含量} (\mu\text{mol/dL}) = x \times 100$$

(2) 按样本蛋白浓度计算:

$$\text{HDL-C含量} (\mu\text{mol/mg prot}) = x \times V \text{提取} \div (C_{\text{pr}} \times V \text{提取}) = x \div C_{\text{pr}}$$

(3) 按样本质量计算:

$$\text{HDL-C含量} (\mu\text{mol/g 质量}) = x \times V \text{提取} \div W = x \div W$$

(4) 按细胞/细菌数量计算:

$$\text{HDL-C含量} (\mu\text{mol/10}^4 \text{ cell}) = x \times V \text{提取} \div 500 = 0.002x$$

100: 单位换算系数, 1dL=100mL; V提取: 加入提取液一的体积, 1mL; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500万。

注意事项:

- 如果测定吸光值低于或者超过线性范围吸光值, 可以增加样本量或者用提取液一稀释样本后再进行测定。注意同步修改计算公式。
- 提取液一中含有使蛋白变形的成分, 故按蛋白浓度计算时需要重新提取蛋白进行测定。

实验实例:

1、取 0.2mL 人血清样本, 按照测定步骤操作, 使用 1mL 玻璃比色皿测得计算 ΔA 测定=A 测定-A 空白=0.216-

$$0.027=0.189, \text{根据标准曲线 } y=0.7591x-0.0528, \text{计算 } x=0.319, \text{按血清 (浆) 等液体体积计算:}$$

$$\text{HDL-L 含量} (\mu\text{mol/dL}) = x \times 100 = 0.319 \times 100 = 31.854 \mu\text{mol/dL}.$$

2、取 0.1g 鼠肝样本, 加入 1mL 提取液一, 冰浴匀浆, 离心后取上清按照测定步骤操作, 使用 1mL 玻璃比色皿测得计算 ΔA 测定=A 测定-A 空白=0.082-0.027=0.055, 根据标准曲线 $y=0.7591x-0.0528$, 计算 $x=0.142$, 按样本质量计算:

$$\text{HDL-L 含量} (\mu\text{mol/g 质量}) = x \div W = 0.142 \div 0.1 = 1.420 \mu\text{mol/g 质量}.$$

参考文献:

[1] Warnick G R, Nauck M, Rifai N I. Evolution of Methods for Measurement of HDL-Cholesterol: From Ultracentrifugation to Homogeneous Assays[J]. Clinical Chemistry, 2001, 47(9):1579-1596.

[2] Yan S, Lin Q. Methods for Detection of High-Density Lipoprotein Cholesterol and its Standardization[J]. Chinese Journal of Laboratory Medicine, 1998, 21(1): 19-22.

相关系列产品:

BC0590/BC0595 游离脂肪酸 (FFA) 含量检测试剂盒

BC0750/BC0755 乙醛脱氢酶 (ALDH) 活性检测试剂盒

BC1890/BC1895 游离胆固醇 (FC) 含量检测试剂盒

BC1980/BC1985 总胆固醇 (TC) 含量检测试剂盒